

NOUVEAU

# Offrir aux patients astigmatiques un confort ABSOLU<sup>1-3</sup> et une stabilité éprouvée<sup>1,4</sup>




## LES PORTEURS DE LENTILLES CORNÉENNES TORIQUES SONT :

**20 %** plus susceptibles de souffrir de sécheresse que les porteurs de lentilles cornéennes sphériques<sup>5</sup>

**35 %** plus susceptibles de souffrir d'inconfort à la fin de la journée<sup>5</sup>

Les lentilles cornéennes **toriques TOTAL<sup>MD</sup>** sont dotées de la technologie de gradient d'eau qui offre une teneur en eau de **près de 100 % à la surface\***, de sorte que rien ne touche l'œil, si ce n'est un doux tampon d'humidité<sup>6-9</sup>.

DAILIES TOTAL1<sup>MD</sup> for Astigmatism

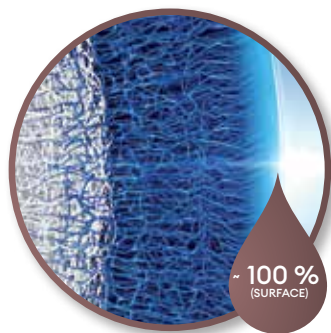


~ 100 %  
(SURFACE)

**Transition graduelle** de la teneur en eau du noyau jusqu'à la surface<sup>6-9</sup>.

La technologie offre une combinaison de **grande perméabilité\*\*** et de **confort exceptionnel**<sup>1-3,10,11</sup>.

TOTAL30<sup>MD</sup> for Astigmatism

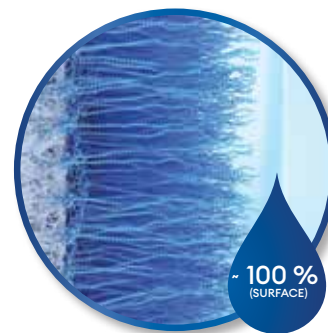

~ 100 %  
(SURFACE)

\* D'après des mesures in vitro réalisées sur des lentilles non portées.

\*\* Dk/t des lentilles cornéennes TOTAL30<sup>MD</sup> for Astigmatism = 123 à -3,00 D; Dk/t des lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1<sup>MD</sup> for Astigmatism = 127 à -3,00 D

# La conception des lentilles cornéennes PRECISION BALANCE 8|4<sup>MD</sup> offre une stabilité éprouvée<sup>1,4</sup>

Les lentilles cornéennes **DAILIES TOTAL1<sup>MD</sup>** for Astigmatism SE STABILISENT EN ENVIRON **37** SECONDES\*

Se stabilise à moins de 3° de l'orientation idéale<sup>1,4</sup>

Oscillation < 3° à chaque clignement<sup>1,4</sup>

Les lentilles cornéennes **TOTAL30<sup>MD</sup>** for Astigmatism SE STABILISENT EN ENVIRON **60** SECONDES\*

99% FIRST-LENS FIT SUCCESS<sup>4\*</sup>

95% FIRST-LENS FIT SUCCESS<sup>1\*</sup>

Trait de repère unique à 6 heures

Les points de stabilisation à 8 et à 4 heures aident à réduire l'interaction avec la paupière inférieure

## Caractéristiques techniques

Lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1 <sup>MD</sup> for Astigmatism			
Dk/t : 127 à -3,00 D	Épaisseur du centre : (mm) 0,11 à -3,00 D	Rayon de courbure (mm) : 8,6	Diamètre (mm) : 14,5
Matériau : delefilcon A	Teneur en eau dans le noyau : 33 %	Module du noyau (MPa) : 0,7	
Teinte de manipulation : VISITINT <sup>MD</sup>	Teneur en eau à la surface : près de 100 %	Conception : PRECISION BALANCE 8 4 <sup>MD</sup> (prisme-ballast)	
Emballage : emballage de 30, emballage de 90, emballage d'essai de 5	Caractéristiques supplémentaires : filtre UV de classe I <sup>†</sup> et filtre de la lumière bleu-violet <sup>†</sup>		
PUISSANCE SPHÉRIQUE	CYLINDRE	AXE	
+4,00 D à +0,25 D (par incréments de 0,25 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D -2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°	
Plano à -6,00 D (incrément de 0,25 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D -2,25 D	Cercle complet par incréments de 10 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	
-6,50 D à -8,00 D (incrément de 0,50 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D -2,25 D	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 160°, 170°, 180°	
Lentilles cornéennes TOTAL30 <sup>MD</sup> for Astigmatism			
Dk/t : 123 à -3,00 D	Épaisseur du centre : (mm) 0,10 à -3,00 D	Rayon de courbure (mm) : 8,6	Diamètre (mm) : 14,5
Matériau : lehfilcon A	Teneur en eau dans le noyau : 55 %	Module du noyau (MPa) : 0,6	
Teinte de manipulation : VISITINT <sup>MD</sup>	Teneur en eau à la surface : près de 100 %	Conception : PRECISION BALANCE 8 4 <sup>MD</sup> (prisme-ballast)	
Emballage : boîte de 6 unités, boîte de 3 unités et 1 unité d'essai	Caractéristiques supplémentaires : filtre UV de classe I <sup>†</sup> et filtre de la lumière bleu-violet <sup>†</sup>		
PUISSANCE SPHÉRIQUE	CYLINDRE	AXE	
De +6,00 à -6,00 (incrément de 0,25 D)	-0,75 D, -1,25 D, -1,75 D, -2,25 D	Cercle complet par incréments de 10	
De +8,00 à +6,50 (incrément de 0,50 D)			
De -6,50 à -10,00 (incrément de 0,50 D)			

**Demandez à votre représentant Alcon comment vous pouvez offrir à vos patients astigmatiques un confort absolu<sup>1-3</sup> et une stabilité éprouvée<sup>1,4</sup>.**

\* D'après le mouvement, le centrage et l'orientation de la lentille lors de l'ajustement initial.

\*\* Les lentilles cornéennes à filtre UV ne remplacent PAS les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou les lunettes de soleil à filtre UV, car elles ne couvrent pas complètement l'œil et le pourtour de l'œil. Le patient doit continuer de porter des lunettes à filtre UV selon les directives.

† Aucun bienfait clinique n'a été démontré avec une réduction de 34 % de la lumière visible à des longueurs d'onde inférieures à 450 nm.

Références : 1. Dans le cadre d'un essai clinique visant à évaluer la performance sur l'œil des lentilles cornéennes TOTAL30<sup>MD</sup> for Astigmatism, où n = 69; données internes d'Alcon, 2021. 2. Dans le cadre d'un essai clinique où n = 18; données internes d'Alcon, 2021. 3. Données internes d'Alcon, 2021. 4. Dans une étude où n = 47; données internes d'Alcon, 2020. 5. Multi Sponsor Surveys Inc. The 2014 Gallup Target Market Report on the Market for Toric Contact Lenses. 6. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. *Contact Lens Anterior Eye*. 2012;35(Suppl 1):e14. 7. Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2013;54: résumé électronique 500. 8. Analyse in vitro de la perméabilité à l'oxygène, de la teneur en eau et de l'imagerie de la surface des lentilles; données internes d'Alcon, 2021. 9. Analyse in vitro de la texture lisse à la surface extérieure des lentilles cornéennes lehfilcon A et corrélation avec la teneur en eau; données internes d'Alcon, 2021. 10. Données internes d'Alcon, 2019. 11. Données internes d'Alcon, 2021.

Voir l'information complète sur le port, l'entretien et la sécurité liés aux lentilles cornéennes.

© 2022 Alcon Inc. CA-DTA-2200027